

IDENTIFICATION PATIENT

Sexe : M F n° d'identification unique ou identifiant* :

Nom de naissance: Nom d'usage** :

Prénom : Date de naissance :

Adresse :

*Le n° d'identifiant permanent figure sur le CR de résultat

**Le nom d'usage correspond à votre nom d'épouse

INFORMATIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT

Date et heure du prélèvement : le/..... /..... àh.....min

Modalités de recueil	Transfert sur tube boraté* (voir instruction au dos)
<input type="checkbox"/> Urines de milieu de jet	Effectué le __ / __ à __ h __
<input type="checkbox"/> recueil sur poche pédiatrique	<input type="checkbox"/> par le patient
<input type="checkbox"/> recueil sur sonde à demeure	<input type="checkbox"/> par un professionnel de santé :
<input type="checkbox"/> recueil par sondage	
<input type="checkbox"/> Autre :	
.....	

Coller votre étiquette
Nom/Prénom :
Ville :
Tel :

* Le transfert doit être réalisé uniquement pour la recherche d'une infection urinaire (ECBU)

Traitement antibiotique : NON OUI Préciser:

Contexte clinique :

<input type="checkbox"/> Patient symptomatique	<input type="checkbox"/> Patient asymptomatique
<input type="checkbox"/> Brûlures mictionnelles	<input type="checkbox"/> Contrôle post-antibiothérapie
<input type="checkbox"/> Douleurs lombaires	<input type="checkbox"/> Bilan de contrôle avant intervention
<input type="checkbox"/> Fièvre	<input type="checkbox"/> Bilan de contrôle après intervention
<input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/> Autre :
.....


*Pour la recherche de mycoplasmes, de mycobactéries ou de *Chlamydiae trachomatis*, merci de contacter préalablement le laboratoire (procédure de recueil spécifique).

Analyse d'urine


MODALITÉS DE RECUEIL DES URINES POUR EOBU

A

PRÉPARATION ET RECUEIL DANS LE POT

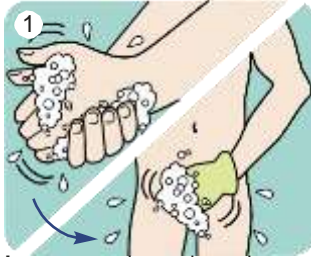

Lavez-vous les mains puis procédez à une toilette intime. **Ouvrez le pot** de recueil bleu.

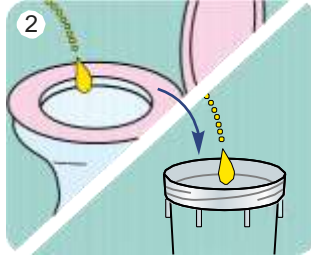

Urinez le premier jet dans le WC puis **recueillez l'urine** dans le pot.



Refermez le pot.

B

TRANSFERT DE L'URINE DANS LES TUBES


Ne pas ouvrir les tubes



Otez l'étiquette blanche (ne pas la jeter).
Insérez à fond le tube dans l'orifice.

Maintenez-le en position jusqu'à la fin du remplissage.

Retirez le tube une fois le remplissage terminé

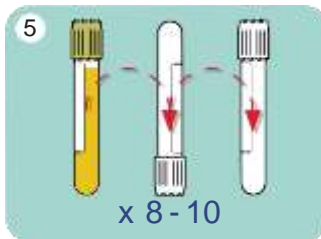

Mélangez en effectuant 8 à 10 retournements.



Remplacez l'étiquette autocollante blanche sur l'orifice du couvercle.

Inscrivez sur les tubes votre nom, pré-nom, date et heure de recueil.

Rapportez les tubes et le pot au laboratoire dans les meilleurs délais.

Note: Si le volume d'urine recueillie dans le pot est insuffisant pour permettre le transfert dans les tubes, ou si vous rencontrez une difficulté lors du transfert, rapportez le tout au laboratoire (conservez le pot bleu au réfrigérateur si vous ne pouvez pas le rapporter immédiatement).

POUR TOUTE QUESTION, CONTACTEZ-NOUS AU 05.53.77.15.15

